

mycchew™


Mâchouilleur nettoyeur dentaire

Pour les enfants de 2 à 8 ans

Encourage la respiration nasale et améliore la fonction des muscles buccaux pour favoriser le développement des dents et des mâchoires.



AIDE AU
NETTOYAGE
DES DENTS

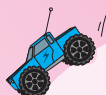

À UTILISER
DEUX FOIS
PAR JOUR
PENDANT 10 À
15 MINUTES

TONGUE, LIPS & JAW EXERCISER

mycchew™

Orthodontic Chewing Brush

www.myoresearch.com

2-8 YEARS

myoTAREA®

Comprendre le problème

Parce qu'ils consomment des aliments mous, de nombreux enfants n'ont pas suffisamment de force de mastication permettant le développement des mâchoires. En outre, la respiration buccale et des muscles buccaux faibles et fonctionnant mal sont des problèmes très courants qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner une déficience de croissance de la mâchoire, augmentant ainsi la probabilité d'un encombrement dentaire et de problèmes orthodontiques.


Comme ces problèmes s'aggravent au fil du temps, il est important d'intervenir tôt en éduquant activement les muscles masticateurs et en encourageant la respiration nasale, tout en travaillant la force et la fonction des muscles buccaux. L'adoption de ces bonnes habitudes favorise non seulement le développement des dents et des mâchoires, mais aussi une meilleure santé générale en décourageant la respiration buccale.

Myotalea® Myochew™

Myotalea® Myochew™ est conçu pour promouvoir activement la mastication chez les enfants âgés de deux à huit ans pour tonifier les muscles masticateurs, tout en encourageant la respiration nasale et l'exercice lingual. Il intègre également des picots pour faciliter le nettoyage des dents. Il constitue un excellent complément aux appareils *Myobrace®* et *Myosa®*, spécialisés dans la correction des problèmes de respiration et de musculature buccale. *Myochew™* sert de moyen engageant et efficace, pour aider les enfants à renforcer les muscles de la langue et de la mâchoire, tout en encourageant des habitudes respiratoires plus saines.

Myochew™ - Caractéristiques

- 1 **Projections de picots** pour nettoyer les dents.
- 2 **Tube lingual** pour renforcer la langue.
- 3 La **base sur ressort pneumatique** stimule le développement de la mâchoire.
- 4 La **double arcade** encourage la respiration nasale.
- 5 **Cordon** pour fixer le *Lip Seal Trainer*.
- 6 **Lip Seal Trainer.**

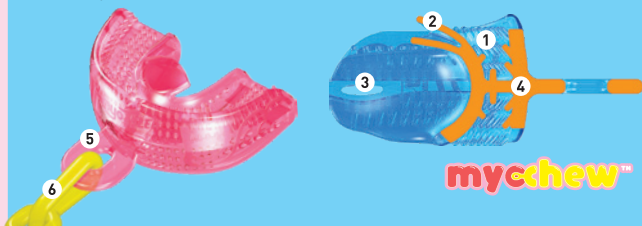

Soutien spécialisé

Le *Myochew*™ offre des avantages intéressants aux enfants qui ont une tendance à la respiration buccale, qui ont un manque de tonus des muscles buccaux ou pour qui l'hygiène dentaire est un problème. Sa conception innovante en fait un appareil adapté pour répondre aux besoins uniques de ces patients simplement et de façon engageante. En outre, il contribue à tonifier et renforcer la fonction des muscles buccaux, tandis que les picots spéciaux contribuent à promouvoir l'hygiène bucco-dentaire.




Mode d'emploi




Étape 1 – Tenez votre *Myochew*™, tube pour pression linguale vers le haut.




Étape 2 – Mettez votre *Myochew*™ dans la bouche.

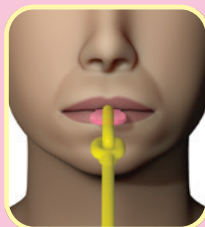

Étape 3 – Gardez les lèvres jointes et respirez par le nez.

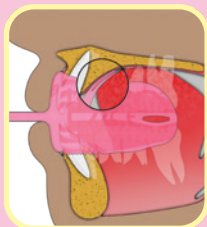

Étape 4 – Pressez le tube pour pression linguale plusieurs fois avec votre langue.

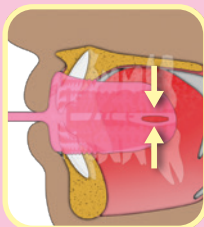

Étape 5 – Mâchouillez délicatement et comprimez la base du ressort pneumatique plusieurs fois.

Une fois que vous avez terminé, rincez à l'eau tiède et mettre à sécher !



Myotalea® Myochew™ est conçu pour les enfants âgés de 2 à 8 ans pour encourager la respiration nasale tout en améliorant la fonction des muscles buccaux, en plus d'aider le nettoyage des dents avec ses picots intégrés. Le **Myochew™** est également adapté à des groupes spécifiques d'enfants qui respirent par la bouche, dont les muscles buccaux manquent de tonus ou pour qui l'hygiène dentaire est un problème.

L'appareil est pour les enfants une façon amusante et efficace de corriger ces problèmes pour favoriser le développement des dents et des mâchoires, pour un meilleur état de santé générale en décourageant la respiration buccale.

Avantages du **Myochew™** :

- Moyen simple et efficace d'améliorer la respiration, les muscles buccaux et l'hygiène bucco-dentaire ;
- Appareil facile à utiliser pour les enfants de différentes tranches d'âges ;
- Aide les enfants qui sont particulièrement enclins à la respiration buccale, à une mauvaise hygiène dentaire ou dont les muscles buccaux sont faibles ;
- Fabriqué en silicone souple et flexible pour un confort supérieur et une biocompatibilité optimale.

Nettoyage de votre **Myochew™ :** Passez votre appareil **Myochew™** sous l'eau tiède chaque fois que vous le retirez de votre bouche. Il peut également être immergé dans l'eau bouillante après utilisation pour un nettoyage renforcé. Nous recommandons d'utiliser les comprimés **Myoclean™** pour tous vos appareils bucco-dentaires deux fois par semaine. Demandez à votre praticien de vous parler de **Myoclean™**.

ATTENTION : L'appareil **Myochew™ ne doit être utilisé que lorsque votre enfant est supervisé et comme le mode d'emploi le prévoit. Il ne doit pas être utilisé lorsque l'enfant dort.**



Myotalea® par Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Représentant aux USA :

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



Représentant en Europe :

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



UTILISATION
MULTIPLE POUR
UN SEUL ET
MÊME PATIENT



CONSERVER À
L'ABRI DE LA
LUMIÈRE DIRECTE
DU SOLEIL



NETTOYER
AVANT
UTILISATION