


myoTAREA TONGUE AND LIP
EXERCISE APPLIANCE

mycchew™

Orthodontische kauw appliance

Vroege wisselfase, van 4 maanden tot 2 jaar oud.
Voor ontwikkeling van kaakgroei en tanden voor peuters.

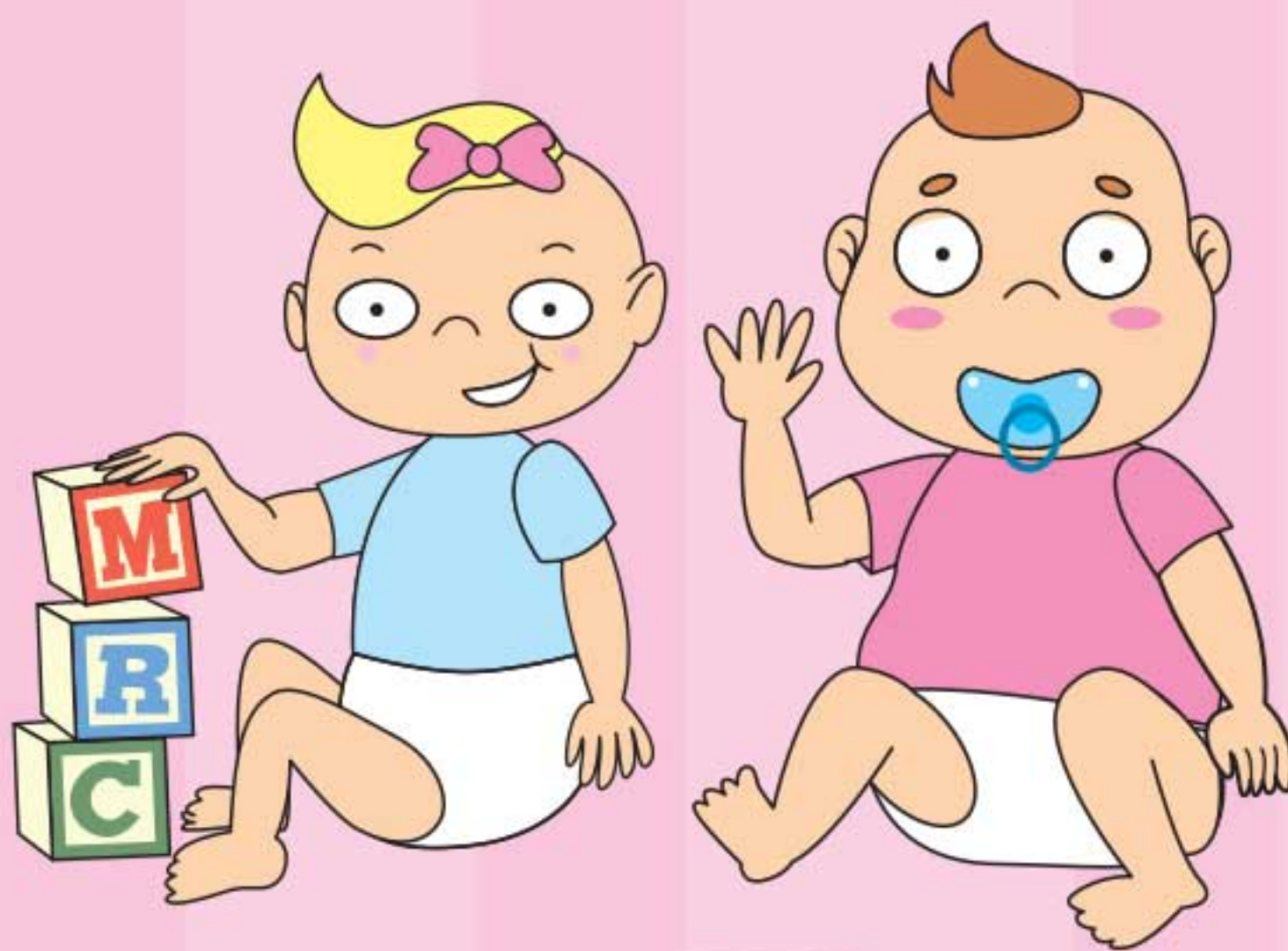

VOORDAGELIJKS
GEBRUIK VOOR
10-15 MINUTEN

mycchew™

Orthodontic Chewing Brush

myoTAREA

HELPT BIJ ADEMHALINGSPROBLEMEN DOOR NEUSADEMEN TE BEVORDEREN.
Patented Worldwide, see Myoresearch.com for details.

De *Myotalea*® *Myochew*™ is ontworpen voor peuters (vanaf 4 jaar) om actief de tong, lippen en kaakspieren sterker te maken om te helpen bij het ontwikkelen van kaken en het doorkomen van de eerste tandjes in de mond. De *Myochew*™ heeft de volgende unieke eigenschappen:

1. Borsteltjes voor het schoonmaken van tandjes.
2. Tong tube om de tongspier sterker te maken die de bovenkaak helpen groeien.
3. Ovale opening bij de kiezen om natuurlijke kaakgroei te stimuleren.
4. Dubbele boogvorming stimuleert neusademhaling.
5. Het tong lipje bevordert het kauwen bij doorkomende tandjes.
6. Afneembare strap om aan kleding te bevestigen om te voorkomen dat het de top de grond valt.
7. Medische graad siliconen materiaal voor comfort en natuurlijke pasvorm. Geen latex of andere vervelende bestanddelen.
8. Kan worden gekookt of gesteriliseerd worden wanneer nodig.



Het schoonmaken

Maak de *Myochew*™ schoon onder stromend water wanneer je het uit de mond haalt. De *Myochew*™ kan worden gesteriliseerd in kokend water. Dit kan de duurzaamheid van de appliance aantasten. Je kunt Myoclean 2x per week gebruiken hiervoor. Vraag aan je behandelaar naar *Myoclean*™, het aanbevolen schoonmaak middel voor *Myochew*™.



Bevordert normale. tand- en kaakgroei voor peuters. Voor vroege wisselfase van 4 maanden tot 2 jaar .

VOORDAGELIJKS
GEBRUIK VOOR
10-15 MINUTEN

Stap 1: Laat het kind zelf de *Myochew*TM oppakken en zelf in de mond stoppen. Dit van bijzonder belang wanneer de *Myochew*TM als speenvervanger ingezet wordt.



Stap 2: Laat het kind zelf de *Myochew*TM in de mond stoppen maar zorg ervoor dat de tong-tube aan de bovenzijde zit.

Stap 3: Het kind zal op de *Myochew*TM kauwen en oefenen met de tong tegen de tong-tube als de *Myochew*TM in de mond zit.

Stap 4: Laat het kind de *Myochew*TM gebruiken tot ze deze zelf uitdoen of uitspugen.

Stap 5: Maak de *Myochew*TM vast aan kleding met de strap om te voorkomen dat deze op de grond valt.

Stap 6: Maak de *Myochew*TM schoon onder stromend water. Stop de *Myochew*TM in kokend water voor 10 minuten om te steriliseren indien nodig.

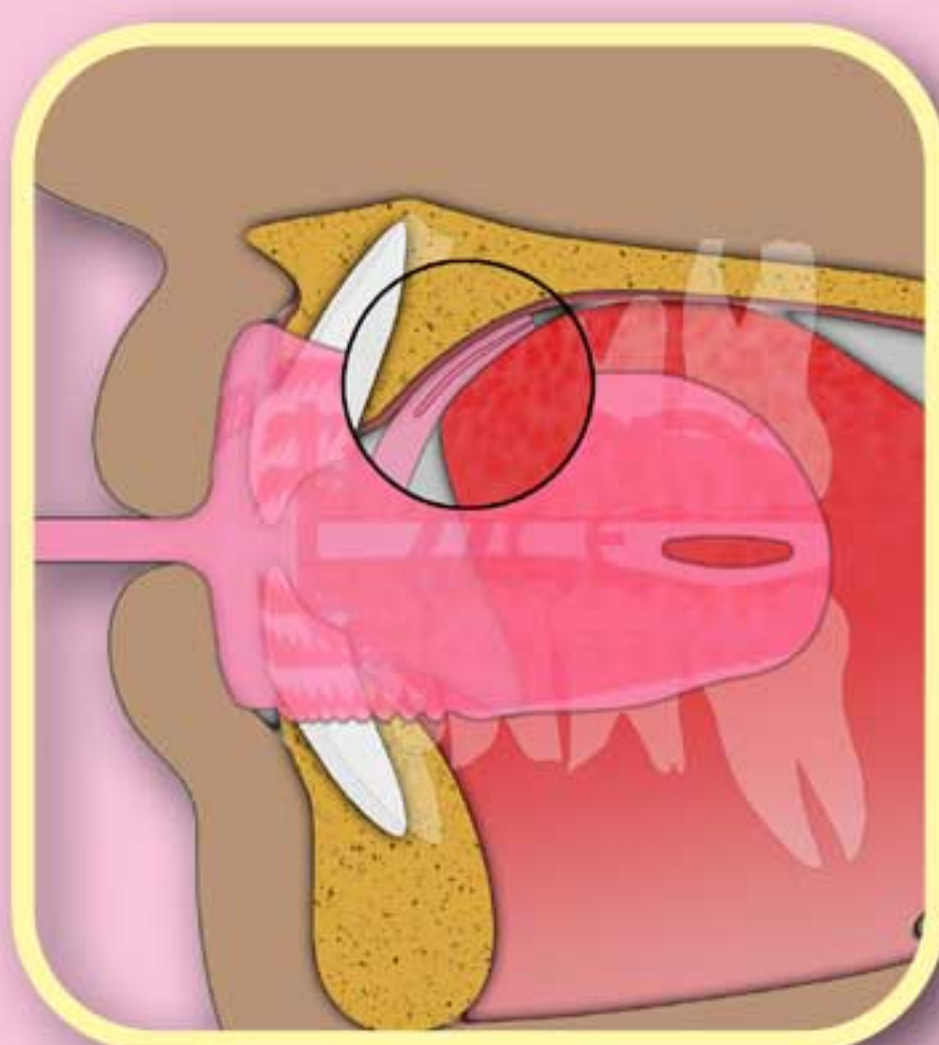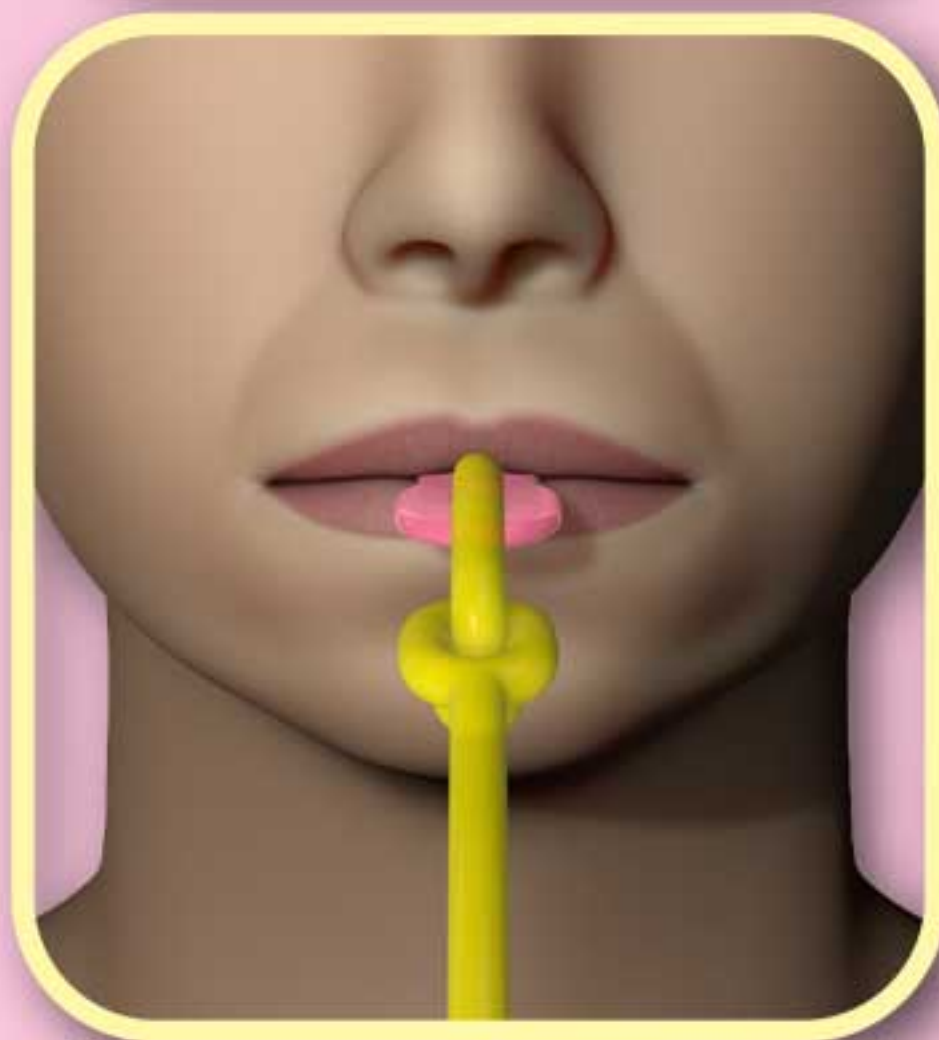

Verbeterd de luchtweg door neus ademhaling te bevorderen.

Gebruik minimaal voor een periode van 6 maanden of langer indien gewenst.

- Peuters krijgen hun eerste tandjes wanneer ze ongeveer 4-6 maanden oud zijn. Het geven van flesvoeding en het gebruik van spenen betekent gebruikelijk dat deze peuters niet opgroeien als het hoort en tot 90% onderontwikkelde kaken,, orthodontische problemen en mogelijk slaap-adem problemen hebben.
- De *Myochew*™ door *MRC* helpt bij het doorkomen van de tandjes en verzacht de irritatie bij het doorkomen. Aan de natuurlijke gewoonte om te kauwen wordt ook aan voldaan en helpt de onderkaak te groeien. Meer belangrijk, het is specifiek ontworpen voor peuters om de tong en spieren rond de mond te verbeteren wat de natuurlijke groei van tanden en kaken bevordert.
- Mondademen op deze leeftijd kan leiden tot een achterstand in kaakgroei, met minder ruimte voor tandjes en mogelijk Slaap Afhankelijke Ademhalings problemen tot gevolg. De *Myochew*™ bevordert tevens neusademhaling en de gepatenteerde tongue-tag helpt bij het versterken van de tongspieren welke dan weer helpen bij de groei van de bovenkaak bij peuters en kleuters.
- Als extraatje worden de tandjes ook extra schoon door de borstels en gevoeligheid bij het doorkomen van tandjes wordt verlicht terwijl de 20 doorkomende tandjes allemaal op zn plek terecht komen in de mond. Toegenomen speeksel aanmaak helpt ook bij het voorkomen van tandbederf. Om tandbederf verder te voorkomen, zorg voor minimale suiker inname.
- Het gebruik van de *Myochew*™ kan orthodontische problemen later voorkomen door een optimale, natuurlijke ontwikkeling van kaken.
- Vervolgens kan hierna op deze leeftijd kan de *Myobrace*® of *Infant Trainer*™ worden gebruikt om een behandeling te vervolgen indien gewenst door de tandarts.

LET OP; De *Myocew*™ appliance mag alleen onder supervisie ingezet worden. Niet inzetten als het kind slaapt.



Myotalea® by Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia:
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

USA Representative:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: + 866 550 4696



European Representative:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

Voor gebruik door 1 kind.



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION**

