

IMPROVES **COMFORT AND STABILITY**
DURING BRACES

ブラケットの成果を向上させます



日中1時
間と夜間
就寝時の
使用



TRAINER FOR BRACES

www.myobrace.com

国際特許。詳細はMYORESEARCH.COMをご覧ください。

使用説明

毎日、日中1時間と就寝時にT4Bを使用してください。

宿題、読書をしている時、TV、パソコンの使用時、あるいは遊んでいる間でもT4Bを使用してください。ブラケット装着と同時にT4Bの使用を開始することが最善です。T4Bは歯や歯茎、口の軟組織の損傷や不快感を緩和してくれるでしょう。

矯正治療期間中に顎関節に痛みを感じることがあります。T4Bはその痛みを緩和する翼状スプリントを備えています。

T4Bはマウスガードではありません。スポーツ用は歯科医師と相談をして、パワーガードを使用してください。

T4B構造特徴

ブラケット保護システム

- 1 **ブラケットチャンネル**はブラケットと矯正用アーチワイヤーを覆い、頬と歯茎を保護します。

筋機能効果

- 2 **タンタグ**は舌先の正しい位置の獲得を促します。
- 3 **タンガード**は舌の突出を防ぎ、鼻呼吸を促します。
- 4 **リップバンパー**は下唇の過活動を抑えます。

顎の位置

- 5 装着すると正しい顎位が保たれます。
- 6 **翼状スプリント**は顎の発達を促します。装着することにより、口呼吸と舌の突出を防ぎ、顎位を改善します。

毎日就寝時とTVやゲーム、または宿題をしている時に使用してください。

ご両親へのお知らせ

T4Bは歯列矯正治療をより快適で効果的にするように設計されています。継続して使用することの重要性を理解することが大切です。

- 夜間、舌の突出や口呼吸により装置が外れてしまうことがあります。それでも使用を続けてください。もし夜間の使用が難しい場合は、日中の時間を増やしてください。
- 毎日、定期的に使用してください。日中の使用を心がけ、確立してください。歯科医師の指示に従い、矯正治療の期間を通して使用してください。
- T4Bの使用中は口唇をしっかり閉じてください。
- T4Bを装着していない時でも、舌をタンタグの位置に置くよう心がけてください。
- 週に1～2回は洗浄剤を使用してください。

T4Bを強く噛みこまないこと




Step 1: タンタグを上に向けてT4Bを持ってください。



Step 2: T4Bを口腔内に入れてください。



Step 3: タンタグの位置に舌先を置いてください。

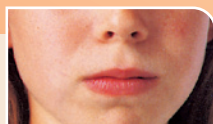

Step 4: 口唇を閉じて、鼻から呼吸をしてください。



#T4B#

装置の効果

*Trainer for Braces (T4B)*はMyofunctional Research Co.のThe Trainer System™の一部です。

T4Bは矯正治療初期の不快感、ブラケットやワイヤーによる軟組織の炎症を防ぎます。

さらに、T4Bは歯列と顎の発達に影響を及ぼす筋機能習癖を改善します。舌の突出、間違った飲み込み、口呼吸などの筋機能習癖を改善することで矯正治療をより効果的にして安定させます。

The Myofunctional Effect™ 筋機能効果


The Trainer System™の全ての装置は口腔筋を訓練するように設計されています(The Myofunctional Effect™)。

T4Bの洗浄

装置を口から取り外した後は、毎回ぬるま湯で洗い流してください。口腔内装置の洗浄は、かかりつけ医にお問い合わせください。

注意：歯科矯正医または歯科医師の指導のもとでご使用ください。

使用期限：6ヶ月(毎日使用した場合)。
使用期間に関わらず12ヶ月で交換してください。

 The Trainer System™ by Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

USA Representative:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



European Representative:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

 **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**
INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE TECHNOLOGY AND EDUCATION



直射日光を避けてください。

同一患者用



非滅菌
使用する前に洗浄してください。