

# myobrace®

FOR BRACES

НОСИТЬ  
ЕЖЕДНЕВНО  
ЧАС ДНЁМ  
И НА ВРЕМЯ  
СНА

ПОСТОЯННЫЙ  
прикус  
с брекетами

повышает эффективность  
ортодонтического лечения  
на брекетах.



[www.myobrace.com](http://www.myobrace.com)

ЗАПАТЕНТОВАНО. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ MYORESEARCH.COM


## В чём причина аномалий прикуса?

У большинства детей в 21 веке челюсти развиваются неправильно, что ведёт к скученности зубов. Как правило, врачи предлагают лечение на брекетах, которые эффективно выравнивают зубы. Однако такие вредные миофункциональные привычки, как прокладывание языка между зубами, ротовое дыхание и неправильное глотание могут привести к проблемам, из-за которых продлевается срок лечения и происходит рецидив.


Эти миофункциональные привычки успешно лечатся одновременно с ношением брекетов. Благодаря этому челюсти лучше развиваются после снятия брекетов, а ретейнеры работают эффективнее.

### Нормальный зубной ряд в сравнении со скученным

Работа языка, щёк и губ, нормальные функции глотания и дыхания влияют на правильное развитие костных структур лица, от чего зависит и положение зубов.

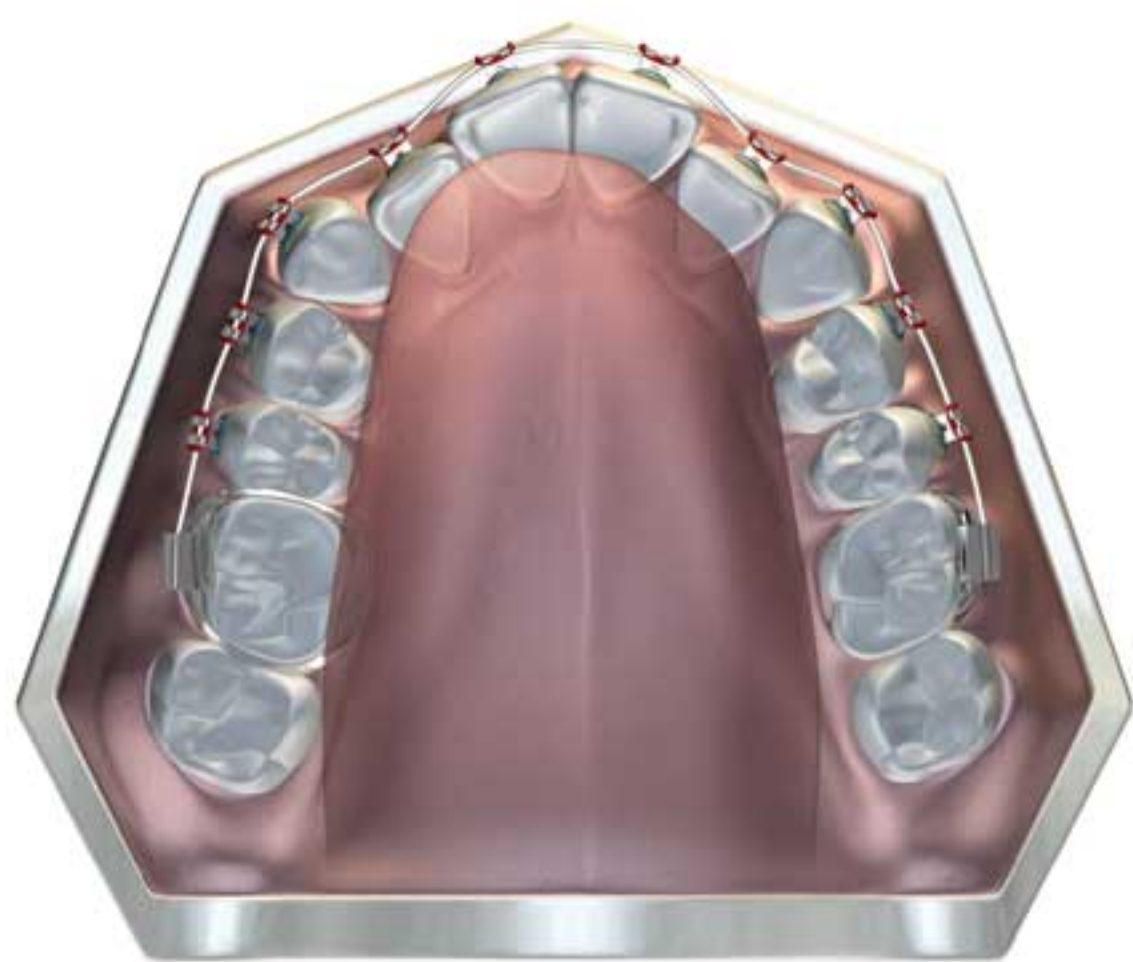

**СУЖЕНИЕ**  
ВЕРХНЕЙ ДУГИ

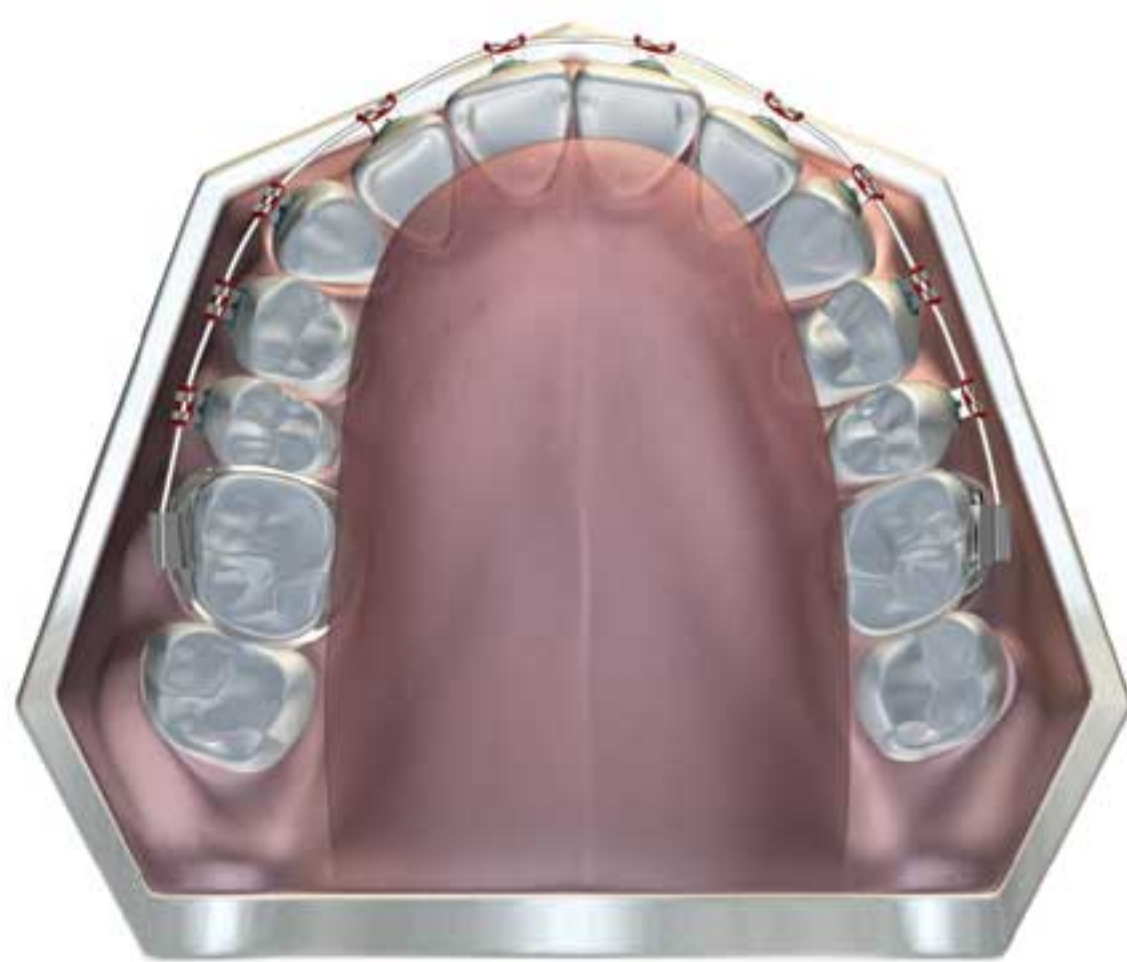

**В НОРМЕ**  
ВЕРХНЯЯ ДУГА

Правильное положение языка способствует эффективной работе брекетов.

## Myobrace® for Braces - B1

Аппарат *Myobrace® for Braces B1*, предназначен для использования вместе с несъёмными брекетами для повышения их эффективности. Он применяется при установке брекетов для коррекции вредных миофункциональных привычек, которые служат причиной ортодонтических проблем. Использование *Myobrace® for Braces* способствует исправлению вредных привычек, что сокращает время ортодонтического лечения и повышает стабильность результата.

**Myobrace® for Braces:** особенности конструкции

**Первый этап:** коррекция вредных привычек



### **Канал для брекетов**

предназначен для размещения верхних (и нижних) брекетов и ортодонтической дуги, для защиты щёк и дёсен.

**Маркерный язычок, ограничитель и элеваторы для языка** тренируют язык занимать правильное положение, прижимаясь к верхней челюсти.

**Увеличенный губной бампер и высокие борта** снимают гиперактивность губ и стимулируют носовое дыхание.



## Инструкция по применению:

*Myobrace*<sup>®</sup> необходимо носить ежедневно 1–2 часа днём и всю ночь во время сна.

В начале лечения может возникнуть чувствительность зубов. Это нормально, но, если боль усиливается, необходимо уменьшить время использования аппарата и сообщить об этом лечащему врачу.



**Шаг 1** Возьмите аппарат *Myobrace*<sup>®</sup> маркерным язычком вверх.



**Шаг 2** Поместите аппарат *Myobrace*<sup>®</sup> в рот.



**Шаг 3** Удерживайте язык на маркерном язычке аппарата.



**Шаг 4** Сомкните зубы и почувствуйте как *Myobrace*<sup>®</sup> работает, выравнивая передние зубы и челюсти.



**Шаг 5** Мягко сомкните губы и дышите носом.

**Аппарат  
*Myobrace*<sup>®</sup>  
нельзя  
жевать!**

**В НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ MYOBRACE<sup>®</sup> МОЖЕТ ВЫПАДАТЬ ИЗО РТА ВО ВРЕМЯ СНА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ НОШЕНИЯ АППАРАТА.**

# Принцип работы

Компания *MRC* лидирует в разработке аппаратов для коррекции вредных миофункциональных привычек у детей. Её успешный опыт ортодонтического лечения без брекетов более 25 лет. Такое лечение улучшает челюстно-лицевое развитие детей.

В основе лечения лежит исправление положения и функции языка, восстановление носового дыхания и тренировка правильной работы перiorальной мускулатуры.

Система *Myobrace*® эффективно тренирует нёбное положение языка и восстанавливает работу ротовых мышц. Действие малых сил способствует выравниванию зубов.


## Цели лечения:

- Губы в покое сомкнуты, когда пациент не ест или не говорит.
- Дыхание через нос, для стимуляции развития челюстей и формирования правильного прикуса.
- Полное отсутствие активности губ при глотании для правильного развития передних зубов.
- Выравнивание зубных рядов.
- Стимуляция развития лицевого скелета.


**Эффективность системы *Myobrace*® достигается за счёт исправления вредных миофункциональных привычек.**



Правильное положение языка в покое

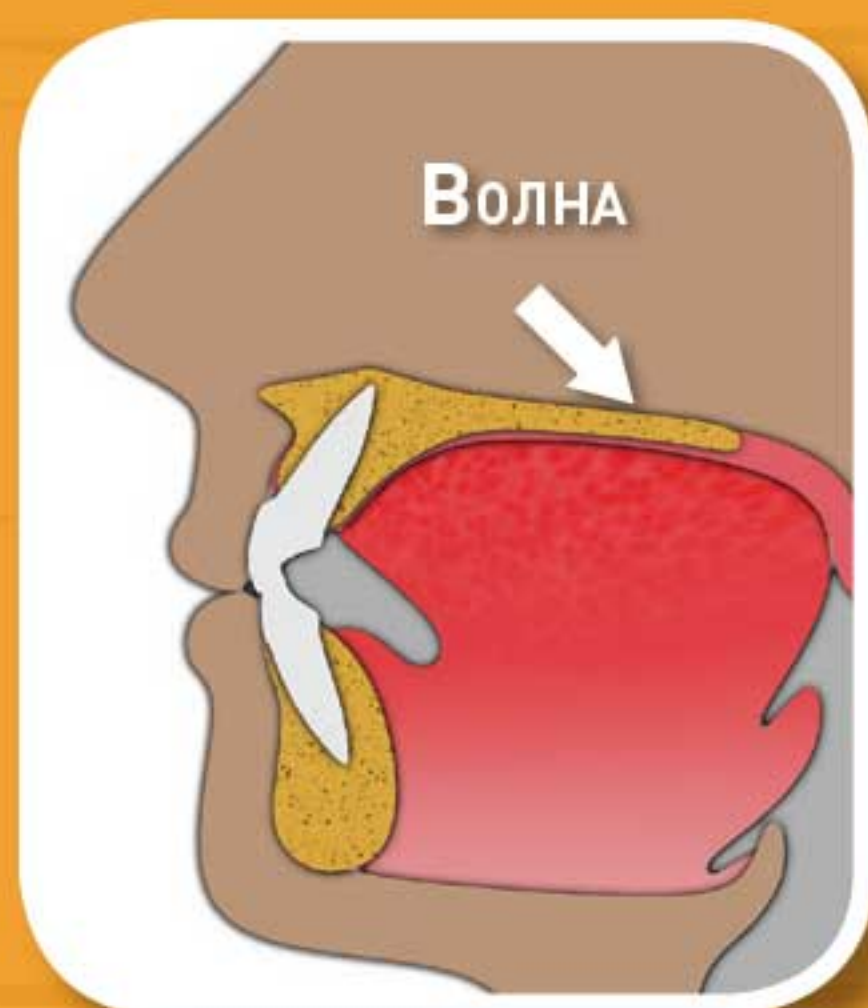

Правильный тип глотания

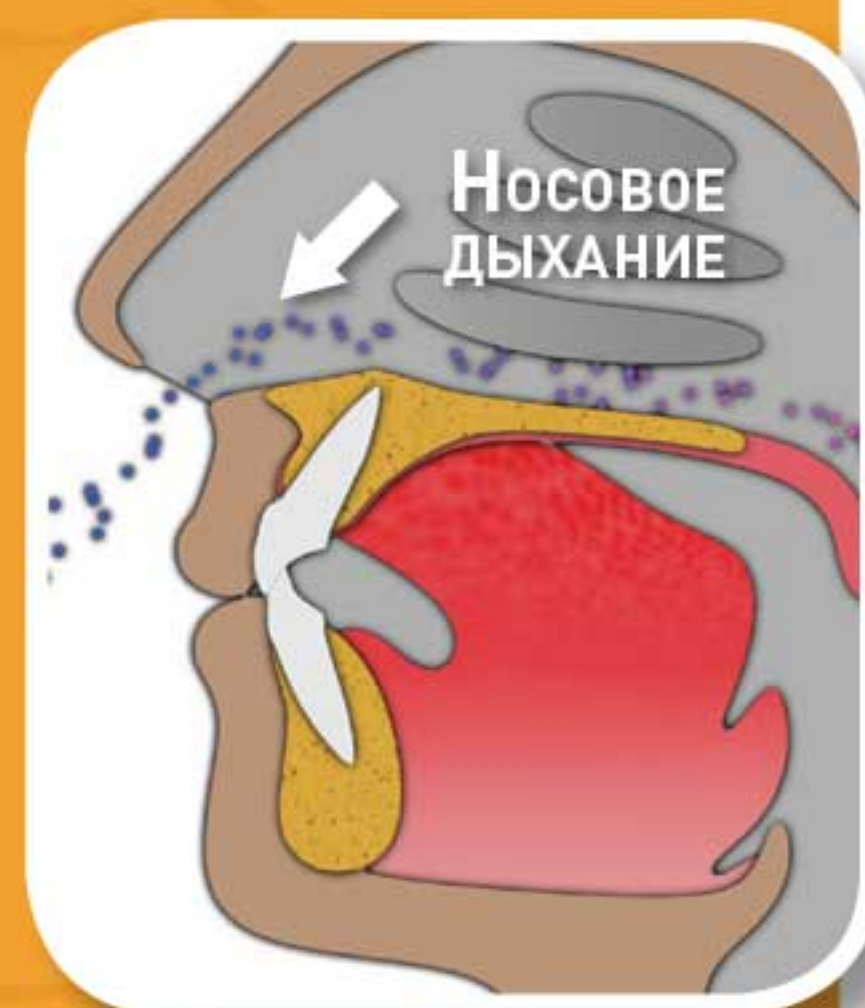

Контроль дыхания

# Показания к применению

Серия *Myobrace® for Braces* рассчитана на три этапа лечения. Она разработана специально для использования с брекетами для исправления вредных миофункциональных привычек, развития челюстей и усиления действия несъёмной техники при выравнивании зубов в постоянном прикусе.

Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункциональных привычек, ведущих к скученности зубов. Аппараты оказывают лёгкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и помогая брекетам перемещать зубы в правильное положение.

## Рекомендации по лечению

Время лечения может отличаться в зависимости от индивидуальной адаптируемости пациента. Для достижения хороших результатов лечения аппарат *Myobrace®* необходимо носить ежедневно.

Для успешного лечения и предотвращения нежелательных осложнений, регулярно посещайте ортодонта или стоматолога для оценки динамики лечения.

**Уход за аппаратом *Myobrace®*:** Каждый раз после использования промывайте *Myobrace®* тёплой проточной водой. Для более тщательной очистки используйте таблетки *Myoclean™* два раза в неделю.

Срок использования изделия: 6 месяцев, при ежедневном ношении.  
Через 12 месяцев аппарат необходимо заменить, независимо от регулярности ношения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ДИПЛОМИРОВАННОГО ОРТОДОНТА ИЛИ СТОМАТОЛОГА**



**Myobrace® by Myofunctional Research Co.**  
Myofunctional Research Co. Australia  
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia  
Tel: +61 7 5573 5999 | [www.myoresearch.com](http://www.myoresearch.com)

USA Representative:

Myofunctional Research Co. USA  
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA  
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA  
Tel: +1866 550 4696



European Representative:

Myofunctional Research Europe B.V.  
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands  
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands  
Tel: +31 416 651 696

Для индивидуального применения.



**MYOFUNCTIONAL  
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE  
TECHNOLOGY AND EDUCATION



ХРАНИТЬ  
ВДАЛИ ОТ  
ПРЯМЫХ  
СОЛНЕЧНЫХ  
ЛУЧЕЙ



НЕ  
СТЕРИЛЬНО  
Вымыть перед  
использованием