

myobrace®

PARA KIDS - BROAD

mixed Dentition

DENTICIÓN MIXTA

UTILICE
DURANTE
UNA HORA
TODOS
LOS DÍAS Y
MIENTRAS
DUERME



www.myobrace.com


PATENTES A NIVEL MUNDIAL. DETALLES DISPONIBLE EN MYORESEARCH.COM

Qué causa los problemas ortodónticos


La mayoría de nuestros niños desarrollarán dientes apretados y alineación incorrecta de la mandíbula. Las investigaciones modernas han demostrado que la respiración bucal, el empuje de la lengua, la deglución inversa y la succión del pulgar - conocidos como hábitos miofuncionales - son las verdaderas causas de los dientes torcidos. Estos hábitos limitan el desarrollo de las mandíbulas y el rostro del niño, dando lugar a problemas ortodónticos. Estas causas no se pueden corregir con brackets.

Normal vs Dientes apiñados

La función de la lengua, las mejillas y los labios determina la posición del diente. El crecimiento facial óptimo depende de la función correcta y los patrones de respiración.

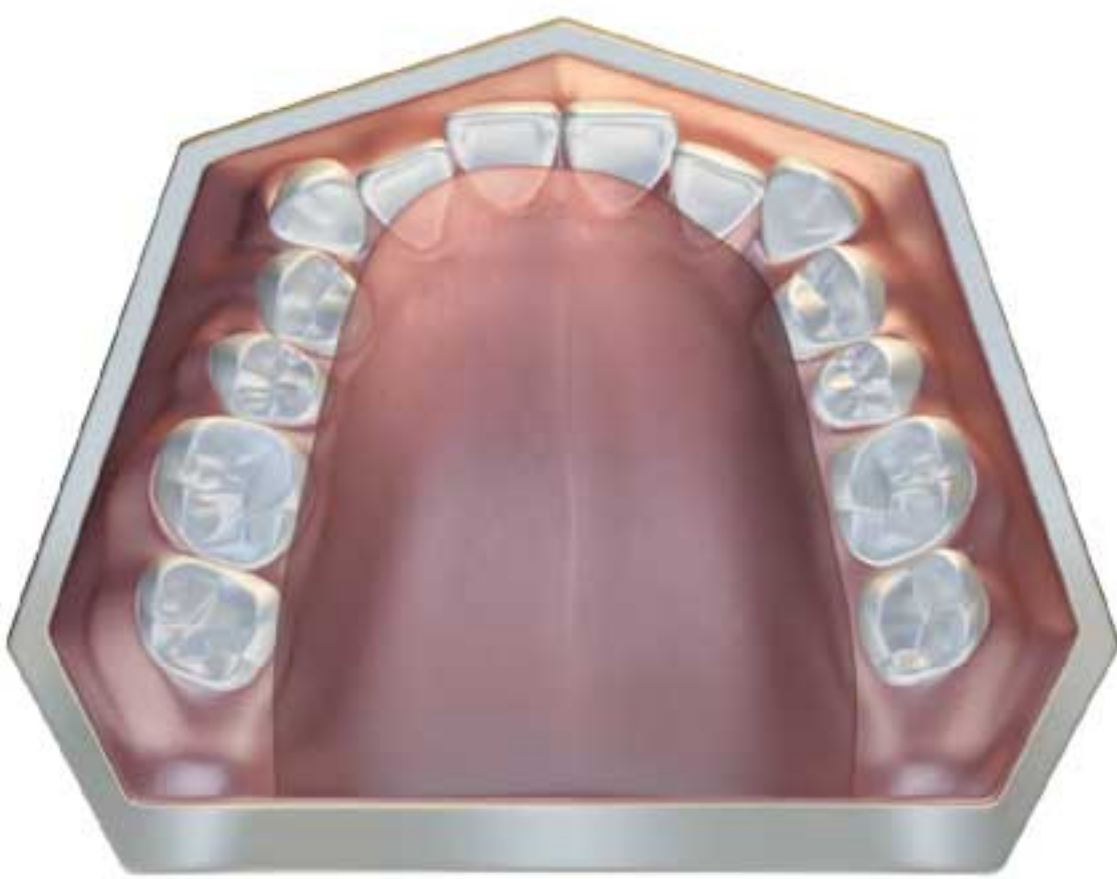

**ARCO BROAD
APIÑADO**

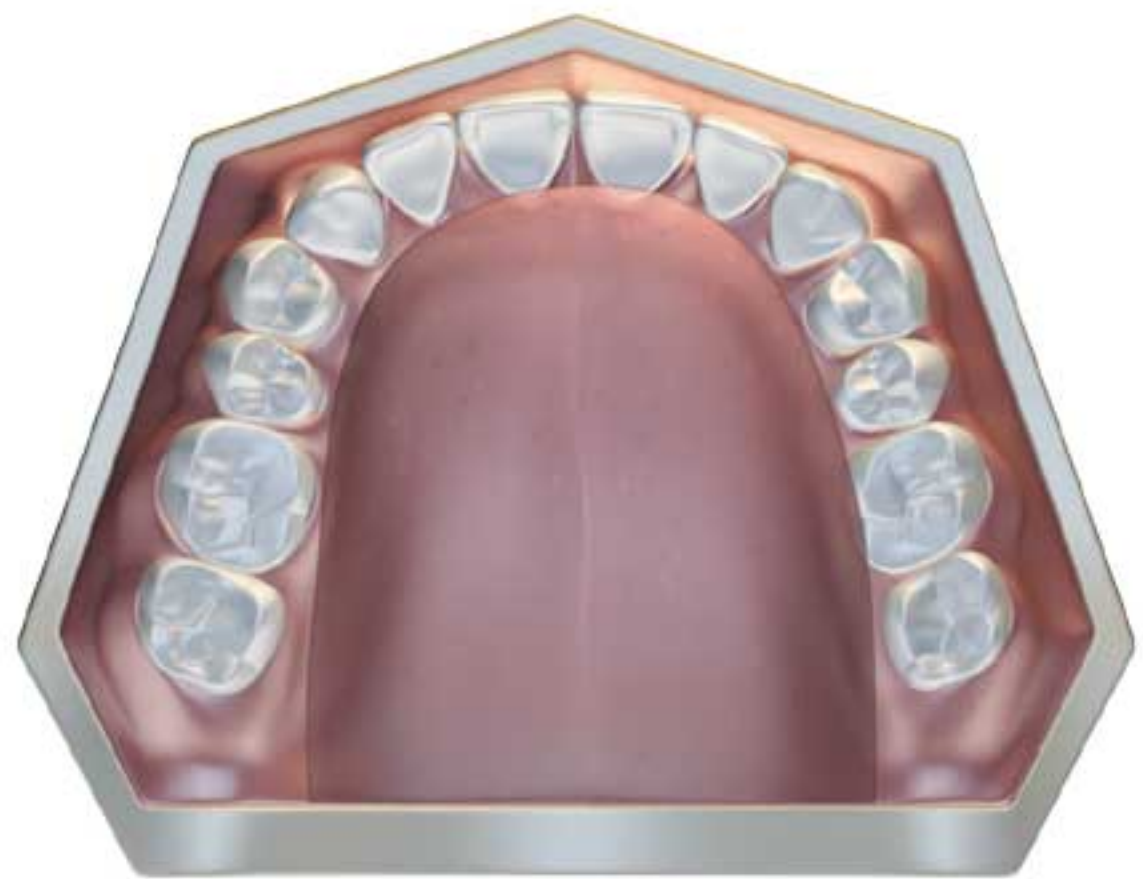

**ARCO BROAD
NORMAL**

NOTA: EL TAMAÑO DEL DIENTE NO HA CAMBIADO.

Myobrace® para Kids - Broad

Myobrace® para Kids - Broad - La serie de aparatos amplios es un sistema de tres etapas con un arco especializado para grupos genéticos y raciales específicos. El sistema está diseñado para corregir malos hábitos orales mientras desarrolla las mandíbulas superiores e inferiores a la forma correcta, permitiendo que los dientes se alineen en su posición natural. *Myobrace® para Kids - Broad* se usa mejor después de que los dientes frontales permanentes hayan aparecido antes de que todos los dientes adultos se hayan desarrollado a los 12 años de edad o mayores.

Myobrace® para Kids Broad - características de diseño - Etapa tres- alineamiento y retención finalretention.

Construcción firme - proporciona excelente alineación y retención de los dientes.

Diseño patentado Broad - Específicamente para formas de arco más amplio.

Hueco grande de la lengüeta, protector de la lengua y elevadores - entrenan a la lengua para sentarse en la posición correcta final.

Bumper labial extendido - desalienta los músculos fuertes, hiperactivos del labio.



Indicaciones de uso


Use su aparato *Myobrace*® durante una o dos horas cada día y durante la noche mientras duerme. Sus dientes pueden ser ligeramente sensibles en las primeras etapas de tratamiento. Esto es bastante normal, pero si el dolor se vuelve excesivo, reduzca el tiempo de aplicación y avise a su dentista.




Paso 1 - Sostenga el *Myobrace*® con la lengüeta hacia arriba.



Paso 2 - Coloque el *Myobrace*® en su boca.

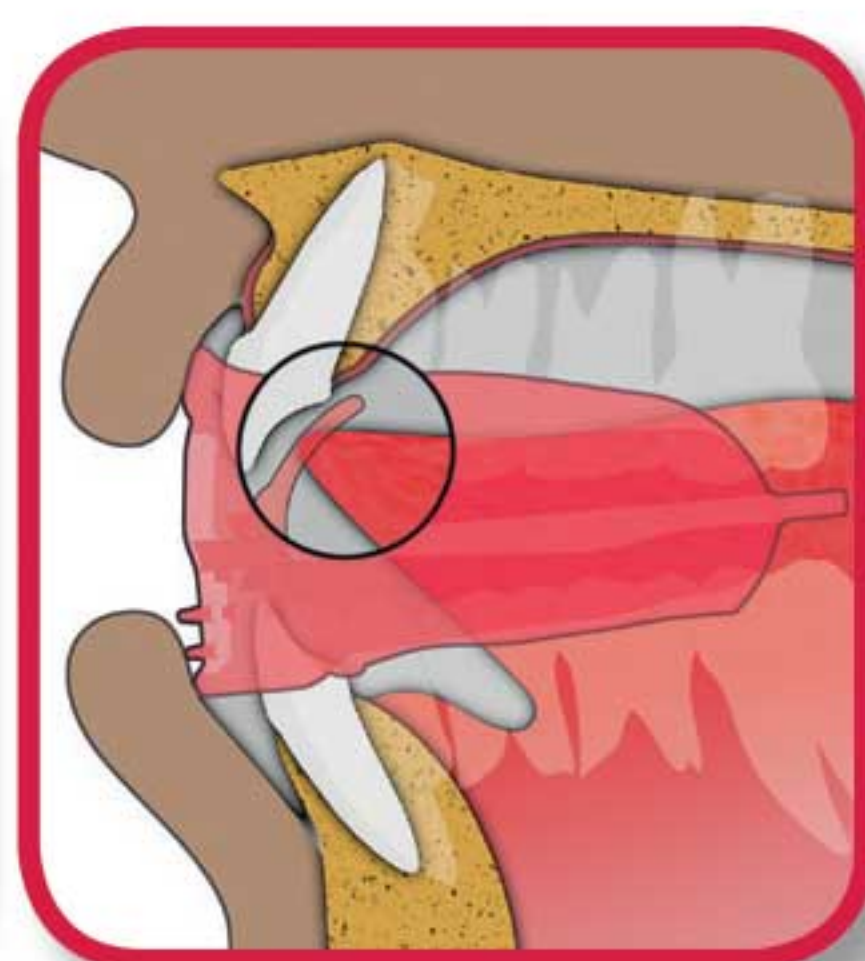

Paso 3 - Mantenga su lengua posicionada en la lengüeta.

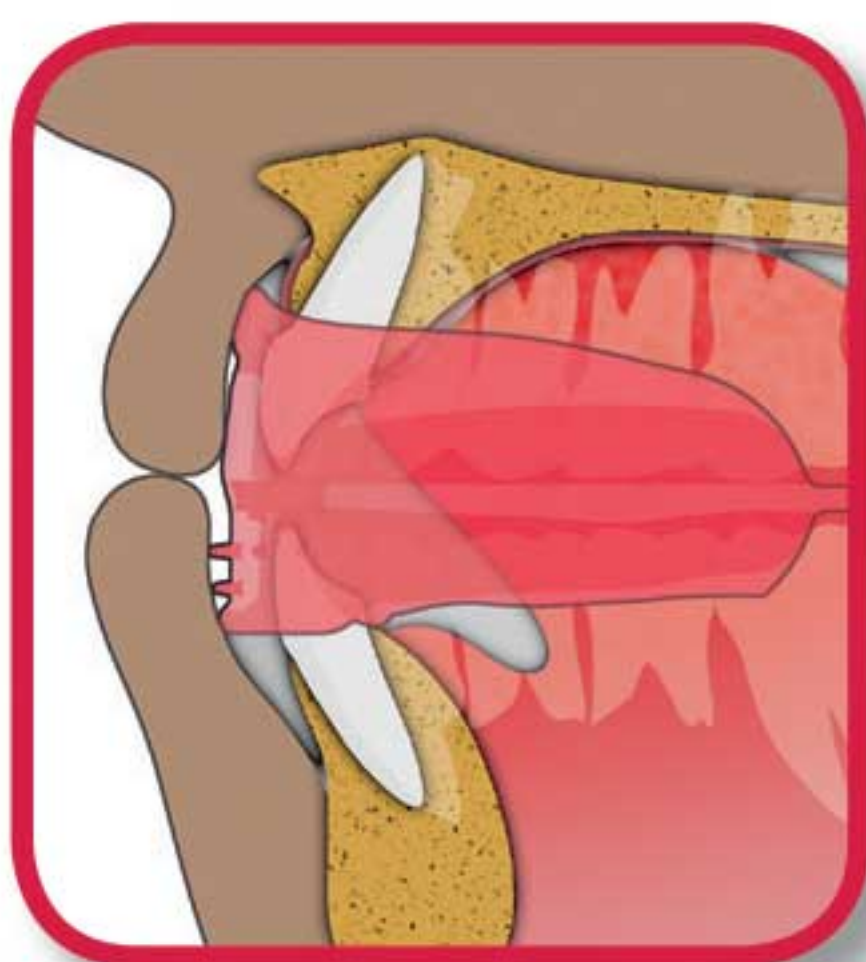

Paso 4 - Cierre el *Myobrace*® y sienta que trabaja para alinear los dientes delanteros y las mandíbulas.



Paso 5 - Mantenga los labios juntos y respire por la nariz.

No mastique su *Myobrace*®!

El *Myobrace*® puede caerse durante la noche al dormir en las etapas iniciales del tratamiento. Si ello sucede, aumente el uso durante el día.


Cómo funciona

MRC ha sido pionero en el uso de aparatos para corregir los hábitos miofuncionales en niños en crecimiento y ha demostrado ser exitoso en la corrección ortodóntica sin brackets. Este tratamiento también puede conducir a un mejor desarrollo facial en los niños en crecimiento. La clave de este tratamiento es la corrección de la posición y función de la lengua, la obtención de la correcta respiración nasal y el reciclaje de los músculos bucales para funcionar correctamente. Los aparatos *Myobrace*[®] entrenan eficazmente la lengua para que se posicione correctamente en la mandíbula superior, reciclar la musculatura oral y ejercer fuerzas ligeras para alinear los dientes.


Metas de tratamiento:

- Los labios juntos en todo momento excepto cuando hablan o comen.
- Respirar a través de la nariz para ayudar al desarrollo de la mandíbula superior e inferior, y para lograr la mordida correcta.
- No hay actividad labial al tragar, lo que permite que los dientes frontales se desarrollen correctamente.
- Alineación dental mejorada.
- Mejor desarrollo facial.

Para que el *Myobrace*[®] funcione, debe corregir sus malos hábitos miofuncionales.

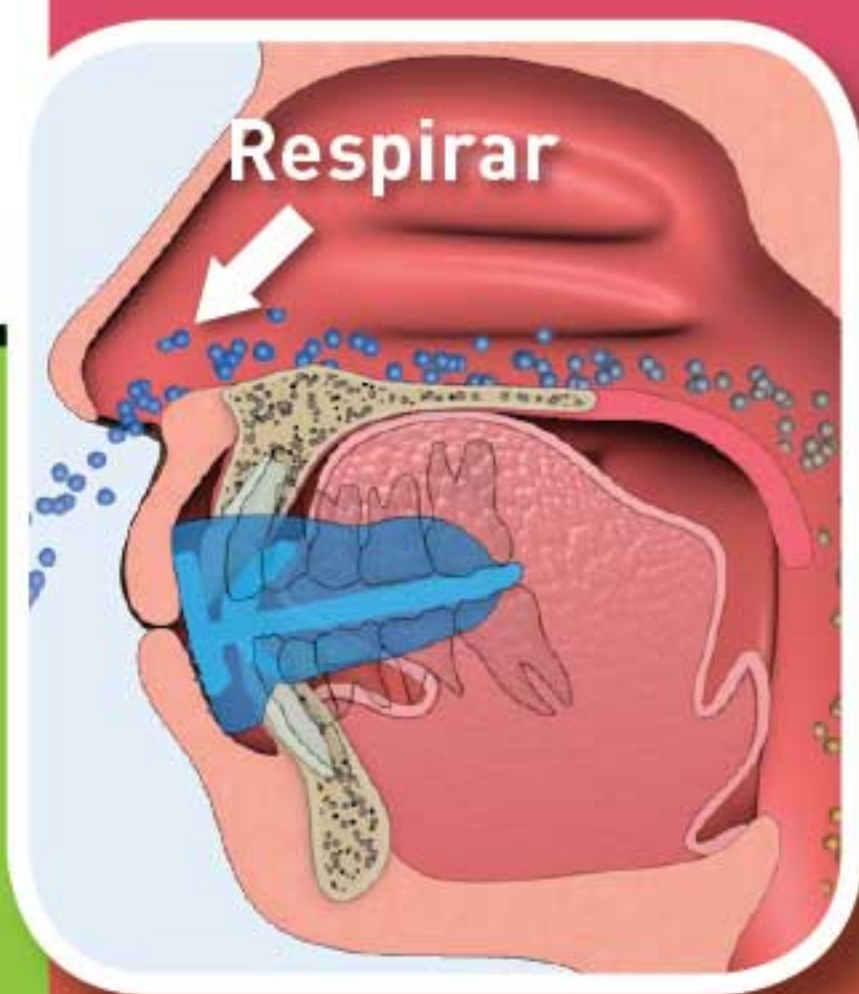

Conciencia de la respiración

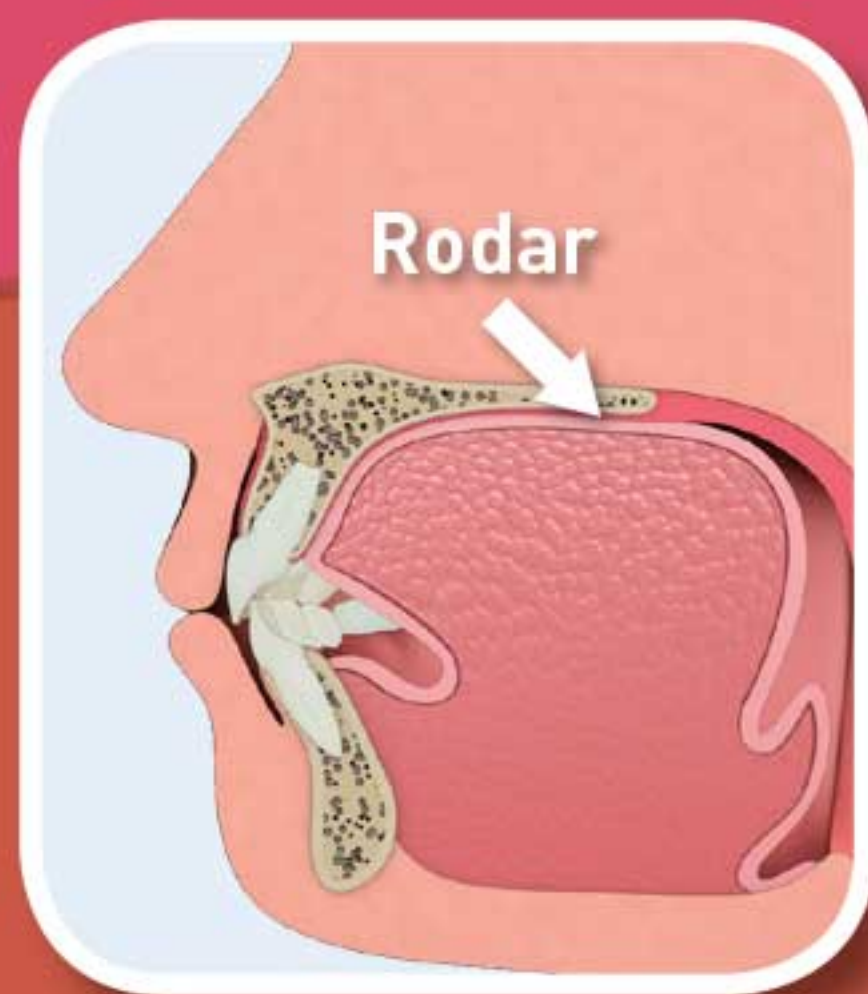

Corregir el patrón de deglución



Posición correcta de la lengua

Myobrace® para Kids – Broad es un sistema de aparatos de tres etapas diseñado específicamente para corregir los malos hábitos orales y mejorar los problemas de desarrollo de la mandíbula superior e inferior en niños con forma de arco ancha.

Estos aparatos corrigen los hábitos miofuncionales, que pueden causar los dientes torcidos, al tiempo que proporciona fuerzas ligeras para ayudar en la expansión de la mandíbula superior y ayuda a los brackets para que alinean los dientes en la posición correcta.

Consideraciones sobre el tratamiento

El tiempo de tratamiento puede variar dependiendo de la adaptabilidad biológica y el cumplimiento de cada paciente. El aparato *Myobrace®* debe utilizarse diariamente para obtener un resultado exitoso. El monitoreo regular por su dentista u ortodoncista es esencial para el tratamiento exitoso y para evitar complicaciones no deseadas del tratamiento.

Limpiando de su *Myobrace®*: Limpie su aparato *Myobrace®* con agua caliente cada vez que lo quite de su boca. Use las tabletas *Myoclean™* para limpiar correctamente dos veces cada semana. Pregunte a su médico o terapeuta dental sobre *Myoclean™*, el agente de limpieza recomendado para todos los aparatos *Myobrace®*.

PRECAUCIÓN: USAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ORTODONCISTA O DENTISTA CON LICENCIA.

Vida Útil : Basado en uso diario es de 6 meses. Reemplazar luego de 12 meses independientemente de su tiempo de uso.



Myobrace® para Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia:
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Representante en los Estados Unidos:
Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1866 550 4696



Representante en Europa:
Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

Uso de un solo paciente.



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



MANTENER
FUERA DE LA
LUZ DIRECTA
DEL SOL.



LIMPIAR
ANTES DE SU
USO.