


myo **TALEA**[®]
TONGUE AND LIP
EXERCISE APPLIANCE

**Lip seal
trainer.**



**MEJORA
EL SELLADO LABIAL**

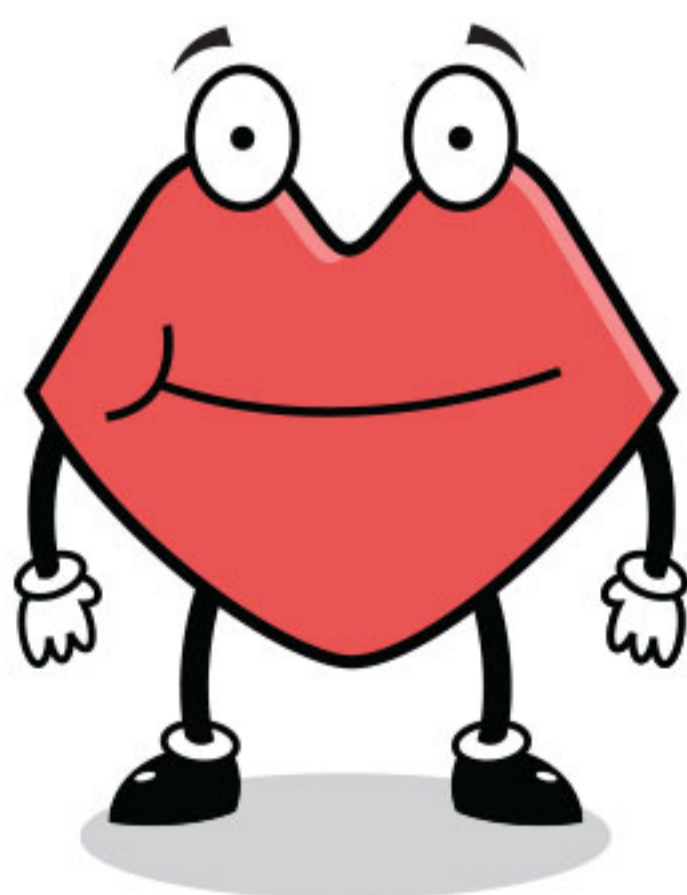

www.myobrace.com

PATENTES PENDIENTES EN TODO EL
MUNDO, PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE
MYORESEARCH.COM

Lip seal trainer.

El *Lip Seal Trainer* está diseñado para usarse en combinación con el *Lip Trainer*™, de *MRC*, para mejorar el sellado de los labios, fortalecer los músculos de los labios y estirar los músculos del labio inferior y así reducir su hiperactividad al deglutir.



Uso dual

Actúa como correa sujetadora para el *Lip Trainer*™

Tabla de entrenamiento

Se puede usar para comenzar a entrenar los labios para que permanezcan juntos en reposo

Paleta para el sellado labial


solo cuando sea competente con la tabla de entrenamiento

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Multiusos del Lip Seal Trainer

El *Lip Seal Trainer* ayuda a entrenar los labios para que permanezcan juntos y mejora la fuerza de los labios. Esto es esencial para la corrección de la respiración bucal crónica. Para los niños con un mal sellado labial y postura de boca abierta, el aparato incluye características que permiten la progresión a la competencia labial. La función tabla de entrenamiento se puede usar como punto de partida durante el primer mes antes de avanzar a al paleta para el sellado labial.

- ① Utilizando la tabla de entrenamiento
- ② Utilizando la paleta para el sellado labial

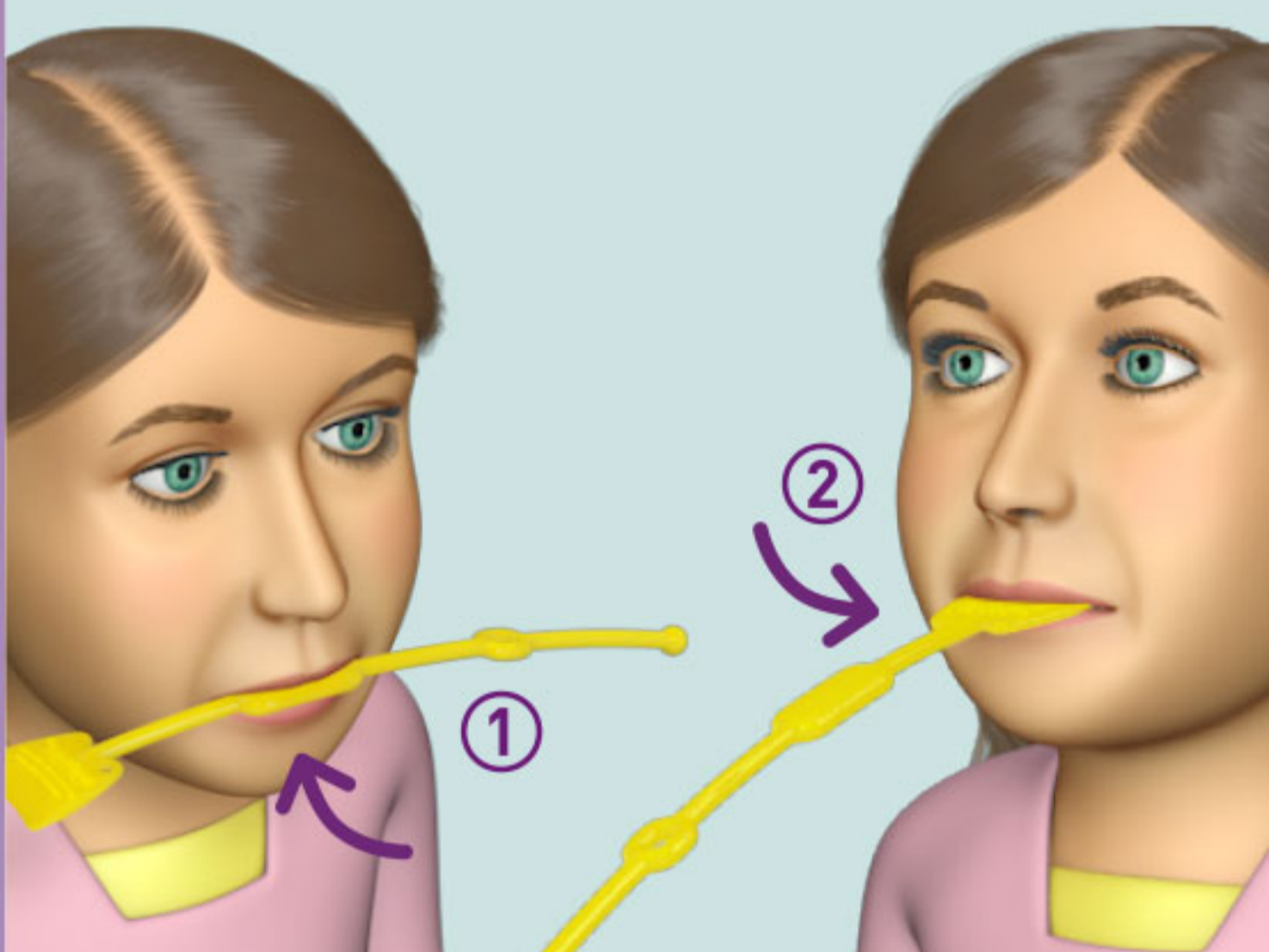

Indicaciones de uso para el Lip Seal Trainer

Se recomienda que el *Lip Seal Trainer* se use por primera vez en combinación con el aparato *Myobrace*®.

1 Coloque el *Lip Seal Trainer* entre los labios con el extremo tocando el aparato *Myobrace*®, luego cierre ligeramente los labios lo suficiente como para mantenerlo en su lugar. Continúe esto durante 10 minutos mientras usa el aparato *Myobrace*®.

2 Retire el aparato *Myobrace*® y use el *Lip Seal Trainer* solo durante otros 2 minutos. Combine con 5 minutos de uso de *Lip Trainer*™, dos veces al día, o según las instrucciones de su doctor.

Estas instrucciones pueden variar según sus necesidades individuales según lo indique su doctor.

El Lip Seal Trainer se utiliza con el sistema Myobrace® de MRC

La investigación moderna ha demostrado que la respiración bucal, la posición incorrecta de la lengua y los hábitos incorrectos de deglución causan dientes apiñados y un desarrollo deficiente de la mandíbula. Una de las formas más importantes de corregir esto es mantener los labios juntos y respirar por la nariz. Aunque el sistema *Myobrace*® aborda esos hábitos, la mayoría de los niños requerirán ejercicios adicionales para lograr estos objetivos de tratamiento.

El desarrollo correcto de las maxilares requiere que los labios permanezcan juntos.

El *Lip Seal Trainer* le enseña a los labios a permanecer juntos en todo momento cuando no están hablando.

LIMPIEZA DEL LIP SEAL TRAINER:

Limpie su *Lip Seal Trainer* con agua tibia cada vez que se lo retire de la boca. Use las tabletas *Myoclean*™ para limpiar correctamente una vez por semana. Pregúntele a su médico o terapeuta dental sobre *Myoclean*™, el agente de limpieza recomendado para todos los aparatos *Myobrace*®.

PRECAUCIÓN: LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS POR UN ADULTO AL UTILIZAR EL LIP SEAL TRAINER.

Uso de vida útil: 6 meses según el uso diario. Reemplace después de 12 meses, independientemente del tiempo de uso.

Uso para un solo paciente



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia:
44 Siganto Drive,
Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999



USA Representative:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue,
Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781,
Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



European Representative:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21c,
5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718,
5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

