




Lip⁺ seal
trainer.

DOS APARATOS
EN UNO



MEJORA
FUERZA Y SELLADO LABIAL

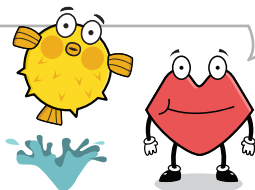

www.myobrace.com

PATENTES EN TODO EL MUNDO, PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE MYORESEARCH.COM



FORTALEZA
LABIAL

El *Lip Trainer*™ está diseñado para usarse junto con otros aparatos del *Sistema Trainer* y *Myobrace*®.

Los niños/as que respiran por la boca no pueden cerrar los labios sin forzar los labios lo que restringe el crecimiento maxilar.

El *Lip Trainer*™ mejora y ayuda a obtener sellado labial mientras se fortalecen y estiran los músculos del labio inferior y se reduce la hiperactividad en la deglución.

Cuerda

Se ata al *Lip Trainer*™ y tiene un doble propósito cuando se usa como *Lip Seal Trainer*

Forma adaptada

Relaja el obicularis oris (músculo situado alrededor de la boca)


Lip Bumper

Entrena los labios

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

Indicaciones de uso del *Lip Trainer*™

El *Lip Trainer*™ debe usarse durante 5 minutos dos veces al día.

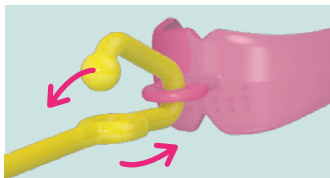

- 1** Atar la cuerda al *Lip Trainer*™ presionando hacia arriba en la zona del agujero en la lengüeta Myobrace®.



- 2** Entonces presione la cuerda hacia abajo por el agujero, estire el final de la cuerda para asegurarse que se mantiene fija en su sitio.

- 3** Inserte el *Lip Trainer*™ con el bumper labial hacia abajo.




- 4** Cierre los labios por encima del *Lip Trainer*™, mantén la cuerda y estire de forma horizontal mientras mantiene los labios juntos.

Si el *Lip Trainer*™ se sale de la boca, volver a colocarlo en la boca y hacer la fuerza justa para que los labios puedan mantener el *Lip Trainer*™ en su lugar.



- 5** Varíe los ejercicios estirando de la cuerda ligeramente hacia arriba y entonces ligeramente hacia abajo para fortalecer el labio superior e inferior individualmente.

Repetir el ejercicio durante 5 minutos.

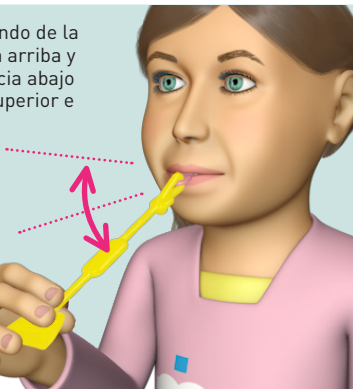

UTILIZAR
DURANTE 5
MINUTOS
DOS VECES
AL DÍA



LIP SEAL

El *Lip Seal Trainer* está diseñado para usarse en combinación con el *Lip Trainer*™ para mejorar el sellado labial, fortalecer los músculos de los labios y estirar el labio inferior para reducir la hiperactividad al deglutir.

Uso Doble

Funciona como cuerda del *Lip Trainer*™



Lip Seal Spade

Ayuda a mantener los labios juntos en reposo, usar únicamente cuando se domina el uso del *Training Board*



Training Board

Puede usarse para empezar a practicar cómo mantener los labios juntos en reposo



CARACTERISTICAS DEL DISEÑO

El *Lip Seal Trainer* tiene un objetivo doble, se puede usar como un dispositivo independiente así como de cuerda para el *Lip Trainer*™

Usos multiples del *Lip Seal Trainer*

El *Lip Seal Trainer* ayuda a ejercitar los labios para que se mantengan juntos y mejora su fuerza. Es esencial para la corrección de los respiradores orales crónicos. Para los niños/as con un sellado labial pobre y una postura con la boca abierta, el aparato incluye características que permiten una progresión de la competencia labial. El *Training Board* puede usarse como punto de partida para los primeros meses, antes se pasar a al *Lip Seal Spade*.

Utilizando el *Training Board*



Utilizando el *Lip Seal Spade*



Instrucciones de uso del *Lip Seal Trainer*

Se recomienda que el *Lip Seal Trainer* se use primero en combinación con el *Myobrace*®.


- 1** Coloque el *Lip Seal Trainer* entre los labios con el final tocando el *Myobrace*® entonces cierre los labios lo suficiente para mantenerlo en su lugar.

Continúe durante 10 minutos cuando usas el *Myobrace*®.

- 2** Quitese el *Myobrace*® y use el *Lip Seal Trainer* solo durante otros 2 minutos.

Combine el uso con 5 minutos de *Lip Trainer*™, dos veces al día o como el especialista te haya indicado.

Estas instrucciones pueden modificarse en función de las necesidades individuales indicadas por tu especialista.

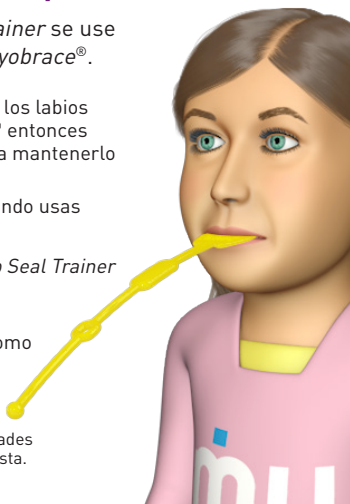

El Lip Trainer™ y el Lip Seal Trainer se utilizan con el Sistema Myobrace® de MRC

Las últimas investigaciones muestran como la respiración oral, una posición incorrecta de la lengua y los hábitos de deglución pueden generar apiñamiento dental y mal desarrollo maxilar. Una de las mejores formas de corregirlo es manteniendo los labios juntos y respirar por la nariz. Aunque el Sistema Myobrace® corrige esos hábitos, muchos niños pueden necesitar ejercicios adicionales para conseguir el objetivo.

El Lip Trainer™ se utiliza para estilar y fortalecer los músculos de los labios, además de enseñar a mantener los labios juntos siempre que no se esté comiendo o hablando.

Para un correcto desarrollo maxilar se requiere que los labios se mantengan juntos.

Un/a niño/a que respira por la boca no puede desarrollar los maxilares de forma correcta y genera una cara alargada con dientes apiñados. Además la profesión médica muestra que esto lleva a trastornos de la salud relacionados con el sueño.

Al mantener los labios juntos, la lengua ayuda a guiar un correcto crecimiento y los labios ya no restringen el crecimiento del maxilar inferior. El Lip Trainer™ se puede usar en pacientes de cualquier edad, en combinación con el Sistema Myobrace® o Trainer.

LIMPIAR EL LIP TRAINER™: Limpie su Lip Trainer™ con agua caliente cada vez que se lo quite de la boca. Use las pastillas Myoclean™ para limpiarlo por completo una vez a la semana. Pregunte a su Doctor about Myoclean™, el agente limpiador recomendado para todos los aparatos de MRC.

PRECAUCIÓN: LOS NIÑOS DEBEN ESTAR SUPERVISADOS POR UN ADULTO PARA USAR EL LIP TRAINER™.

Tiempo de vida: 6 meses basado en un uso diario.

Reponer después de 12 meses independientemente del tiempo de uso.



Lip Trainer™ por Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Representante en EE. UU.:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



Representante en Europa:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



USO MÚLTIPLE
PARA UN SOLO
PACIENTE



MANTENER
FUERA DE LA LUZ
SOLAR DIRECTA



LIMPIAR
ANTES DE
USAR

LipTrainer_INS_0726_EU-ESP_v5.1.0